


Maxxus Masszázsfofel MX 8.0z

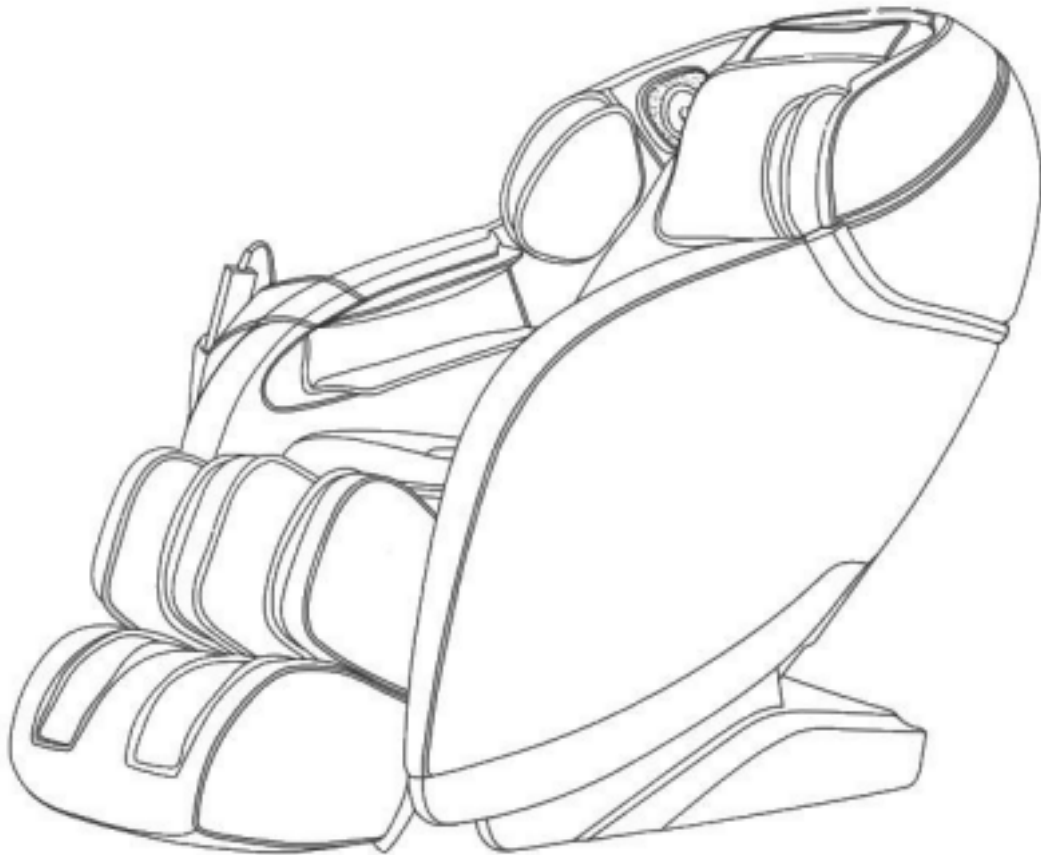

Biztonsági utasítások

A masszázsfotel használata előtt olvassa el a teljes használati útmutatót, különösen a biztonsági előírásokat, a karbantartási és tisztítási utasításokat, valamint a használati utasítást. Győződjön meg arról, hogy mindenki, aki ezt a masszázsfotelt használja, ismerje ezt az információt.

Ügyeljen arra, hogy pontosan kövesse az ebben a kézikönyvben található karbantartási és biztonsági utasításokat. Ezt a masszázsfotelt csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni. A rendeltetéstől eltérő használat balesetveszélyt, egészségkárosodást vagy a masszázsfotel károsodását okozhatja, amelyért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Tápfeszültség csatlakozás

- A készülék működéséhez 220-230 V hálózati feszültség szükséges.
- A masszázsfotelt csak földelt, külön biztosítékkal ellátott 16A-es aljzathoz szabad csatlakoztatni, a szállított hálózati kábellel.
- Ha meg akarja változtatni a masszázsfotel helyzetét, mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Tisztítás, karbantartás vagy egyéb munka előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

- Ha hosszabbítót használ, győződjön meg arról, hogy az megfelel az irányelveknek és előírásoknak.
- A tápkábelt mindig úgy fektesse le, hogy ne sérüljön meg vagy ne botoljon meg benne.
- Az elektromos készülékek, például okostelefonok, személyi számítógépek, televíziók (LCD, plazma, csöves stb.), játékkonzolok stb. működés közben és készenléti üzemmódban elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Tartsa távol ezeket az eszközöket a masszírozástól, mert meghibásodást vagy interferenciát okozhatnak.
- Biztonsági okokból mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha a készüléket nem használja.

További utasítások

- Válasszon sík, tiszta és könnyen hozzáférhető felületet. Biztosítson optimális szabad helyet és maximális biztonságot a masszázsfotel minden oldalán
- Használat közben gondoskodjon jó szellőzésről és optimális oxigén ellátásról.
- A masszázsfotel kültéri használatra nem alkalmas, ezért tárolása és használata csak mérsékelt, száraz és tiszta helyen lehetséges.
- A működési és tárolási hőmérséklet-tartománynak legalább 10°C és maximum 30°C között kell lennie.
- A masszázsfotel használata és tárolása nedves helyeken, például úszómedencékben, szaunákban, fürdőszobákban stb. nem lehetséges.
- Ügyeljen arra, hogy a masszírozót mindig szilárd, sima és tiszta felületre helyezze működés közben és használaton kívül. Az egyenetlen felületet el kell távolítani vagy ki kell egyenlíteni.
- Az érzékeny padlók, például fa, laminált padló, csempe stb., például karcolásoktól való megvédésére javasolt tartósan védőszőnyeget helyezni a készülék alá. Győződjön meg arról, hogy a szőnyeg csúszás ellen biztosított.
- Ne helyezze a masszázsfotel közvetlenül világos vagy fehér szőnyegre vagy szőnyegre, mert a készülék lábai megdörzsölhetik azokat.
- Ügyeljen arra, hogy a masszázsfotel, beleértve a hálózati kábelt is, ne érintkezzen forró tárgyakkal, és megfelelő biztonsági távolságot tartson minden hőforrástól, például fűtőtestektől, kályháktól, kandallóktól stb.


Biztonsági utasítások

- Ha a masszázsfotel nem használja, húzza ki a tápkábelt, hogy megakadályozza harmadik felek, például gyermekek, nem megfelelő vagy ellenőrizetlen használatát.
- A masszázsfotel első használata előtt konzultáljon orvosával.
- Az alábbi egészségügyi problémákkal/diagnózisokkal rendelkező személyek a masszázsfotel használatát előzetesen megbeszéljék és tisztázzák a kezelőorvossal: Csontritkulás, szívbetegség, betegségek, pacemaker, láz, terhesség, nyílt sebek, csonttörések, zúzódások és ficamok, bőrbetegségek, hát- és gerincproblémák.
- A fent felsorolt betegségek vagy diagnózisok esetén az első használat előtt konzultáljon orvosával.
- A masszázsfotel olyan személyek általi használatát, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel a masszázsfotel használatával kapcsolatban, mindig tapasztalt, a biztonságért felelős személy felügyelete mellett végezzék. a felhasználótól.
- Fizikai kényelmetlenség, fájdalom és/vagy légzési problémák esetén azonnal masszírozza meg

megszakítani.

- A masszázst mindig alacsony terheléssel kezdje, és használat közben fokozatosan növelje.
- Egy felhasználó legfeljebb naponta egyszer és legfeljebb 20 percig használja a masszázsfotel.
- A masszázsfotel étkezés után legkorábban 1 órával használja.
- Ne aludjon a masszázs alatt.
- Ügyeljen arra, hogy a masszázs során megfelelő ruházatot viseljen.
- A masszázsfotel csak akkor használható, ha a felhasználó teste száraz. A széket nem szabad közvetlenül zuhanyozás/fürdés után használni.
- Ne használjon semmilyen tartozékot a masszázsfotel használata közben.
- Ezt a masszázsfotel egyszerre csak egy személy használhatja.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a masszázsfotel és a tápkábel kifogástalan állapotban vannak. Soha ne használja a masszázsfotel, ha bármilyen hiba vagy hiba van rajta vagy a tápkábelen.
- Ne használja a masszázsfotel, ha a huzata vagy a műbőr sérült.
- Csak eredeti pótalkatrészek használhatók.
- A masszázsfotel minden használat után meg kell tisztítani. Különösen távolítsa el minden szennyeződést, amelyet a test izzadsága vagy más folyadékok okoztak.
- Mindig ügyeljen arra, hogy folyadékok (italok, izzadság stb.) semmilyen körülmények között ne kerüljenek a masszázsfotelbe, mert ez korrózióhoz, valamint a mechanikai és elektronikus alkatrészek károsodásához vezethet.
- Ez a masszázsfotel gyermekek számára nem alkalmas.
- Használat közben harmadik személyeknek – különösen gyerekeknek és állatoknak – kellő távolságot kell tartaniuk.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak a masszázsfotel alatt, és minden esetben távolítsa el őket.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a masszázsfotel ne használják a gyerekek játékként vagy mászókaként.
- Soha ne végezzen szerkezeti változtatásokat a masszázsfotelen. Ez azonnal érvényteleníti a garanciális és a jótállás utáni igényeket.
- Ennek a masszázsfotelnek a kialakítása a legújabb műszaki és biztonsági szabványokon alapul. Ezt a masszázsfotel csak felnőttek használhatják! Az extrém, helytelen és/vagy nem tervezett használat egészségkárosodáshoz vezethet!


Když je opěrka nohou zvednutá, lidé by na ni neměli tlačit, aby nedošlo k pádu masážního křesla dopředu, poškození masážního křesla nebo jeho součástí nebo ke zranění osob.

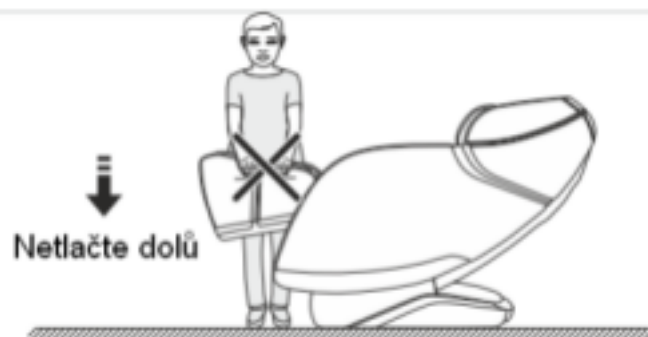


Před usednutím do masážního křesla se ujistěte, že je sedák v křesle správně umístěn. Pokud není sedák správně umístěn, může způsobit bolest hýždí a poškození křesla.




Nikdy neodpojujte síťový kabel nebo kabel řídicí jednotky, pokud je masážní křeslo zapnuté nebo v pohotovostním režimu. To může způsobit poškození masážního křesla nebo úraz elektrickým proudem. Masážní křeslo vždy vypněte hlavním vypínačem a poté odpojte napájecí kabel a případně kabel řídicí jednotky. Pokud masážní křeslo nepoužíváte, vždy odpojte napájecí kabel, abyste zabránili neoprávněnému použití třetími osobami, např. dětmi.

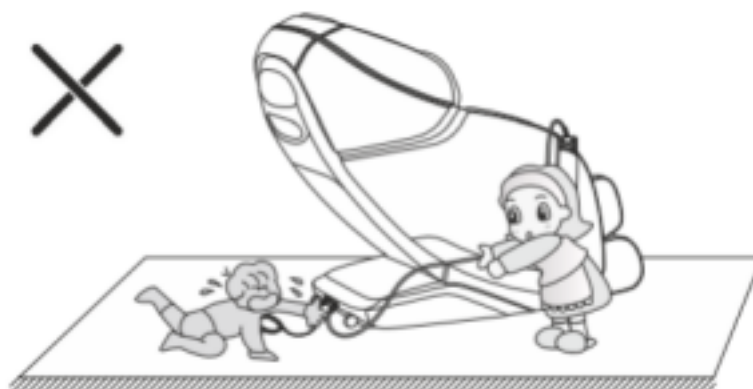

Před použitím masážního křesla vždy zkontrolujte, zda se pod ním nenacházejí děti, domácí zvířata nebo předměty, zejména v oblasti opěrky nohou nebo opěradla. Před použitím je nutné je odstranit, protože mohou poškodit spotřebič a může dojít ke zranění.

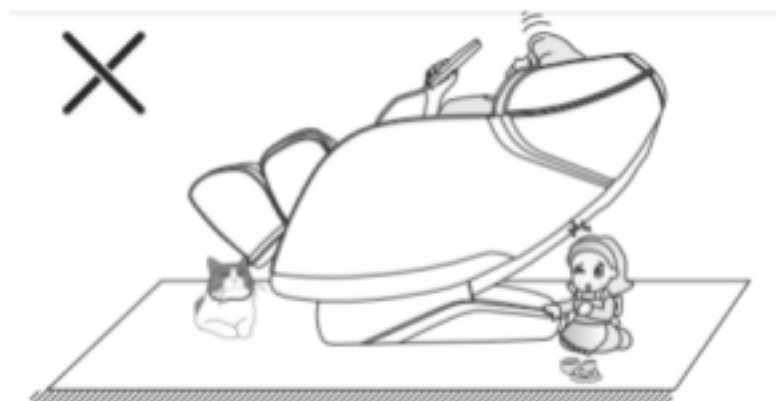


Masszázsfofel áttekintése

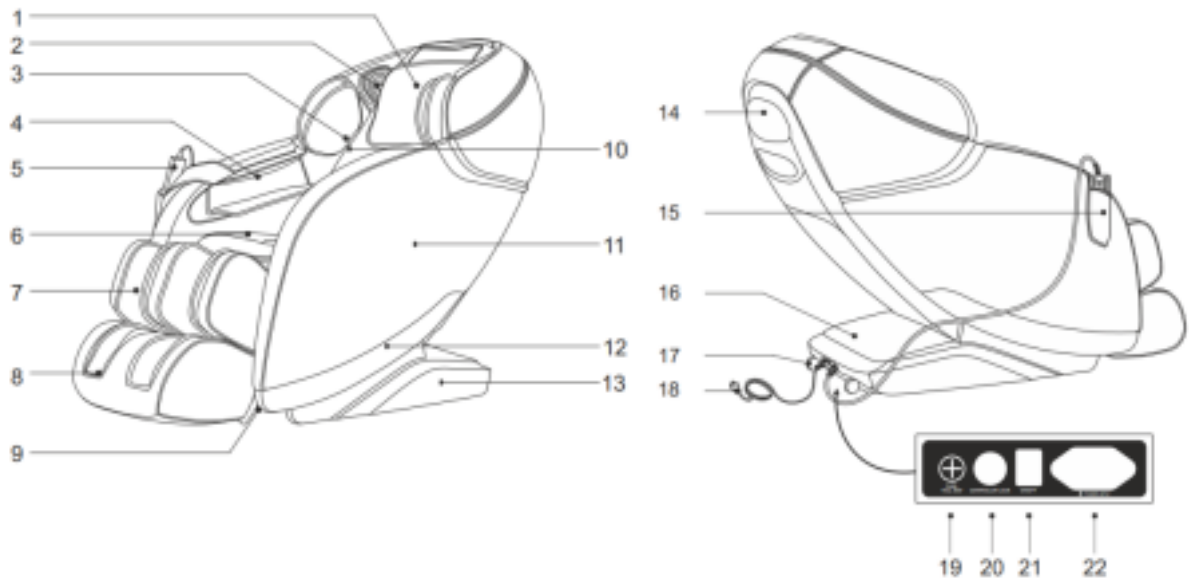


1. párna
2. digitális 3D hangszóró
3. váll/felkar légpárna
4. légpárna az alkarhoz
5. távirányító
6. ülőpárna
7. vádli légpárna
8. lábmasszázs terület
9. lábtartó burkolat
10. hátpárna
11. karfa
12. oldalborító
13. lábtámasz
14. háttámla huzat
15. távirányító tárolózsob
16. főborító
17. szállító kerekek
18. hálózati kábel
19. biztosíték
20. távirányító aljzat
21. tápkapcsoló
22. aljzat a hálózati kábel csatlakoztatásához

Áttekintés – Távirányító

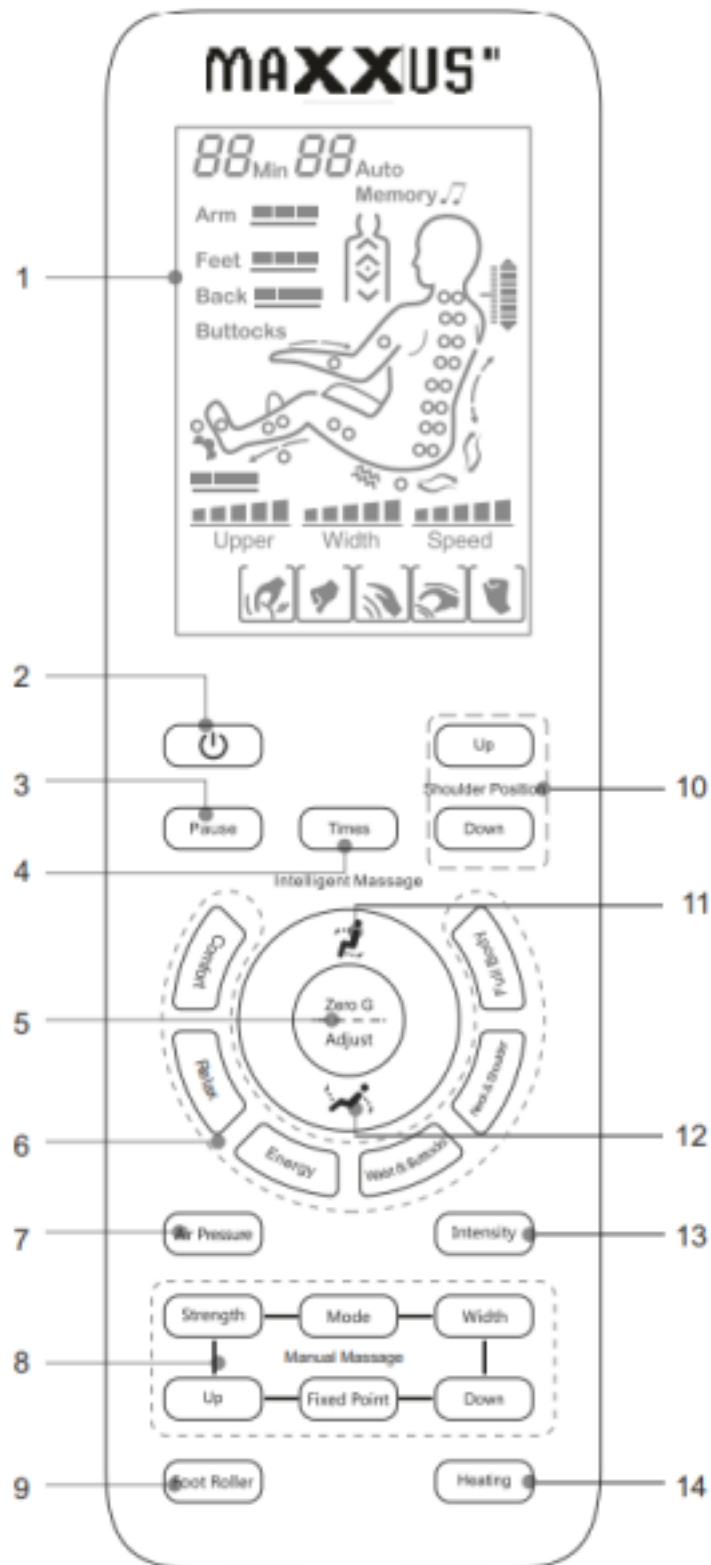


1. LCD kijelző
2. be-/kikapcsoló gomb
3. szünet gomb – Leállítja vagy elindítja az összes masszázst funkciókat.
4. időbeállító gomb
5. dőlésszög-beállító gomb - Három automatikus pozíció van. 6. gomb a masszázsprogramok kiválasztásához
7. légnymás mód gomb (légszakok)
8. Manuális masszázsmód választó gomb - Öt különböző masszázsmód kiválasztására szolgáló gomb: Shiatsu, dagasztó masszázst, könnyű ütögetős masszázst, ütögetős masszázst, kombinált dagasztó és ütögetős masszázst.
9. gomb görgős talpmasszázshoz
10. nyakmasszázst beállító gombok - A gomb megnyomásával szabályozhatja a nyakmasszázst maximális szintjét. (FEL = magasabb, LE = alacsonyabb)
11. gomb a fekvő helyzet beállításához I. - Nyomja meg ezt a gombot a háttámla megemeléséhez és a lábtámasz leengedéséhez.
12. gomb a fekvő helyzet beállításához II. - Nyomja meg ezt a gombot a háttámla leengedéséhez és a lábtámasz felemeléséhez.
13. gomb a légnymás intenzitásának beállításához
14. infravörös fűtés gomb - Be- vagy kikapcsolja az infravörös fűtést a hátsó területen.

Csatlakozás az elektromos hálózathoz

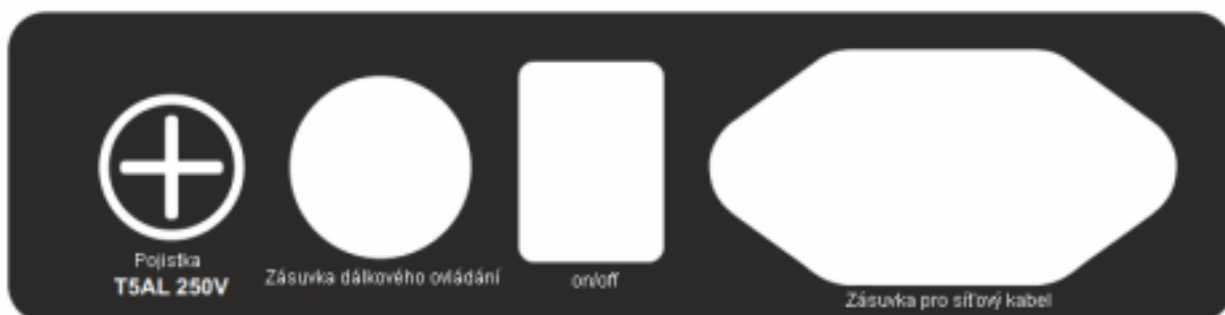

Připojte síťový kabel k přípojné zásuvce masážního křesla.

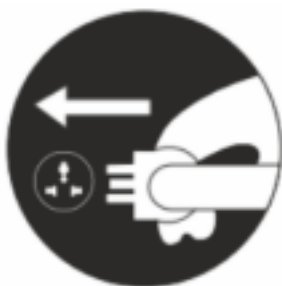

Poté připojte síťovou zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky.

POZOR: Masážní křeslo smí být připojeno pouze k uzemněnému, samostatně jištěnému 16 A jističi a instalované odborníkem pomocí síťového kabelu, který je součástí dodávky.

A masszázs indítása

- Kapcsolja be a masszázsfotel a főkapcsolóval. A főkapcsoló közvetlenül a hálózati kábel csatlakoztatására szolgáló aljzat mellett található (lásd a fenti képet).
- Nyomja meg a be/ki gombot a távirányítón.
- A masszázsfotel most automatikusan test vizsgálatot végez. A masszázsfotel meghatározza a test alakját és a masszázsához optimális váll/nyak magasságot, valamint az akupresszúrás pontokat.
- Ha a masszázsfotel által meghatározott váll/nyak magasság eltér az Ön tényleges váll/nyak magasságától, ezt a beállítást a (nyíl) „fel” vagy a „fel” gomb megnyomásával módosíthatja. "le". 10 különböző magasság állítási fokozat áll rendelkezésre. Ha nem módosítja a beállításokat 10 másodpercen belül a szék a váll/nyak masszázs magassága során meghatározott pozíciót használja test vizsgálat.

Tlačka	Popis	Zobrazení
↑	Změna výšky rameníkrku směrem nahoru	
↓	Změna výšky rameníkrku směrem dolů	












A test vizsgálat során a váll/nyak beállítási szimbóluma megjelenik a kijelzőn, és hangjelzés hallható. A test vizsgálat azonnal ki is hagyhatja annak megkezdése után. Ehhez lépjen közvetlenül a következő lépésre.

Válassza ki a 6 előre beállított masszázsprogram egyikét a megfelelő programgomb megnyomásával.

Masszázsprogramok






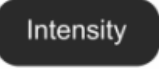

Gomb	Leírás	Kijelző
Comfort	Teljes testmasszázs az izmok ellazítására.	F1 Auto
Relax	A legfontosabb akupresszúrás pontok mélymasszázs a relaxáció és a fájdalomcsillapítás érdekében.	F2 Auto
Energy	Az egész test tökéletesen összehangolt masszázsa az energia növelésére. Ideális alvás vagy pihenés után.	F3 Auto
Waist & buttock	Ez a masszázs a derékra és a fenékre összpontosít.	F4 Auto
Neck & shoulder	Ez a masszázs a vállra és a nyakra összpontosít.	F5 Auto

Manuális masszázss beállítások



Funkció	Gomb	Masszázstípus	Beállítások megtekintése
Manuális masszázss	Mode	Shiatsu	 Sebesség és hatótávolság
Manuális masszázss	Mode	Gyúró masszázss	 Gyorsaság
Manuális masszázss	Mode	Gyengéd ütögető masszázss	 Hatótávolság
Manuális masszázss	Mode	Kombináció: Gyúró és gyengéd ütögető masszázss	 Gyorsaság
Manuális masszázss	Mode	Ütős Masszázss	 Sebesség és hatótávolság
Beállítási lehetőségek			
Gyorsaság	Speed		 Speed 3 fokozatban állítható
Hatótávolság	Width		 Width 3 fokozatban állítható

A „Mode” gomb megnyomásával különböző manuális masszázsmódok közül választhat. A "Speed" gombbal 3 fokozatban állíthatja be a masszázss sebességét a Shiatsu masszázssoknál, a dagasztómasszázssnál, a gyúró és gyengéd ütögetések kombinációjában, valamint a ütögetős masszázssnál. A "Szélesség" gombbal 3 fokozatban módosíthatja a masszázss tartományát (a masszázssgörgök közötti távolságot) Shiatsu masszázss, dagasztó masszázss, gyengéd ütögető masszázss és ütögető masszázss esetén.



Légnyomásos masszáz (légpárnák)

<u>Funkció</u>	<u>Gomb</u>	<u>Leírás</u>	<u>Kijelző</u>	<u>Beállítási lehetőség</u>
Légnyomásos masszázs		Nyomásos masszázs 3 szinten kezek és lábak. vagy kikapcsolva	Arm  Feet 	3 szinten vagy kikapcsolva.
		Nyomásos masszázs 3 szinten kézzel.	Arm 	3 szinten vagy kikapcsolva.
		Nyomásos masszázs 3 szinten lábát. vagy kikapcsolva.	Feet 	3 szinten vagy kikapcsolva.
A nyomásos masszázs intenzitásának beállítása				
Intenzitás		Be ki henger masszázok láb és Beállítások intenzitás		3 szinten vagy kikapcsolva.

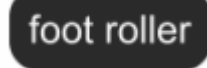

Lábmasszázs

<u>Funkció</u>	<u>Gomb</u>	<u>Leírás</u>	<u>Kijelző</u>	<u>Beállítási lehetőség</u>
Lábmasszázs		Be ki henger masszázok láb és intenzitás beállításai		3 szinten vagy kikapcsolva.

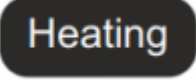Infra fűtés a hátsó részen

Funkció	Gomb	Leírás	Kijelző	Beállítási lehetőség
Funkció fűtés		Kapcsolja be vagy Leállítás infravörös fűtés a környéken zord.		Teljes termikus teljesítmény kb. 3 percre innen bekapcsolás.

Funkció leállítás

Funkció	Gomb			Popis
Emelés				Ha lenyomva tartja ezt a gombot, a háttámla felemelkedik és a lábtámasz egyszerre süllyed. A maximális pozíció elérésekor hangjelzés hallható, és a háttámla mozgása felfelé és a lábtámasz lefelé mozgása leáll. A mozgás megállításához egy adott helyzetben nyomja meg újra ezt a gombot.
Csökkentő				Ha lenyomva tartja ezt a gombot, a háttámla lesüllyed és a lábtámasz egyidejűleg felemelkedik. A maximális pozíció elérése után hangjelzés hallható, és a lábtámasz felfelé és lefelé mozgása folytatódik. A mozgás megállításához egy adott helyzetben

				nyomja meg újra ezt a gombot.
Zéró gravitáció Nyomással				Ennek a gombnak a megnyomásával három előre beállított pozíció választható ki tábor.
Funkció	Gomb	Leírás	Kijelző	Megjegyzés
Idő beállítása		A gomb megnyomásával a masszázs időtartama 5 perccel meghosszabbítható, maximum 30 percre.		Ha túllépte a 30 percet, a kijelző visszatér 5 percre

A masszázsfolat kikapcsolása

Az aktuális masszázs befejezése után kapcsolja ki a masszázsfolat a főkapcsolóval.
Biztonsági figyelmeztetések:


Annak elkerülése érdekében, hogy harmadik személyek (például gyermekek) felügyelet nélkül használják a masszázsfolat, húzza ki a tápkábelt úgy, hogy először húzza ki a kábel csatlakozóját a konnektorból, majd húzza ki a kábelt a masszázsfolatból is. A tápkábelt a masszázsfolattól elkülönítve tárolja.

Bluetooth audio és hangszóró funkció

Ez a masszázsfolat Bluetooth 4.0 vevővel van felszerelve. Kapcsolja be a masszázsfolat, majd keressen új Bluetooth-eszközöket okostelefonján vagy táblagépen keresztül. Masszázs szeke az "IMCM-...." címkével jelenik meg. A zeneválasztás és a masszázsfolatba épített hangszórók hangerejének beállítása kívülről, az Ön által használt okostelefonon vagy táblagépen keresztül történik.

Párna és hátpárna

A párnával szabályozhatja a nyak- és vállmasszázs intenzitását. Eldöntheti, hogy használ-e párnát a feje alá (ajánlott), vagy sem. A háttámla cipzárral kapcsolódik a háttámlához **(lásd 1. kép)**. A fej alatti párna és a hátoldali párna tépőzárral van rögzítve **(lásd 2. kép)**.

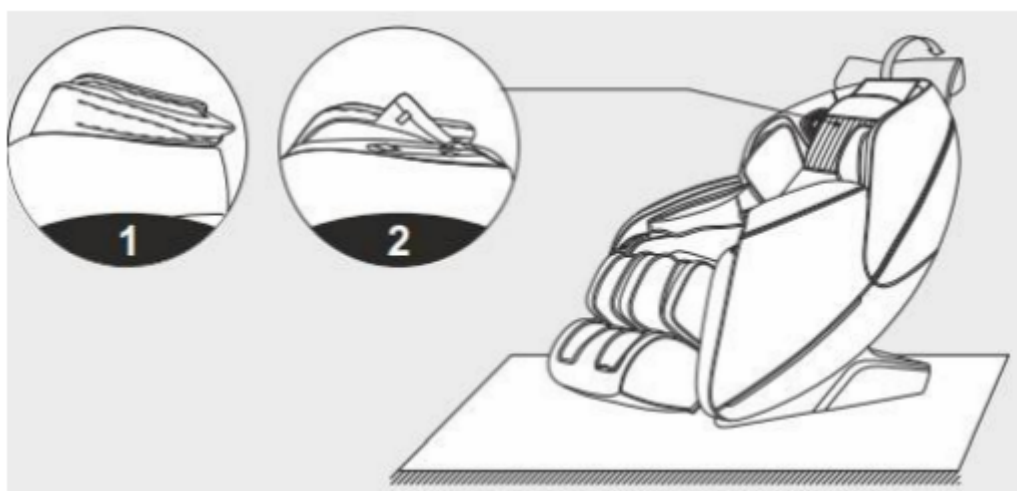


Szállítás

A masszázsfotel egyszerű és biztonságos szállítása érdekében a padlóburkolat hátulján két robusztus szállítókerék található. A masszázsfotel szállításához álljon mögé, és két kézzel fogja meg a háttámla felső végét.

Most emelje fel a masszázsfotel elülső részét úgy, hogy a háttámlát maga felé húzza, amíg a szállító kerekek hozzá nem érnek a padlóhoz. Most a szállító kerekek

Megjegyzés:

A masszázsfotel nagy súlya miatt több ember emelése javasolt. A fotel felemelése, szállítása vagy tárolása során mindig ügyeljen arra, hogy szilárd és biztonságos padlója legyen. Segítségével könnyedén mozgathatja a masszázsfotelt a kívánt pozícióba.

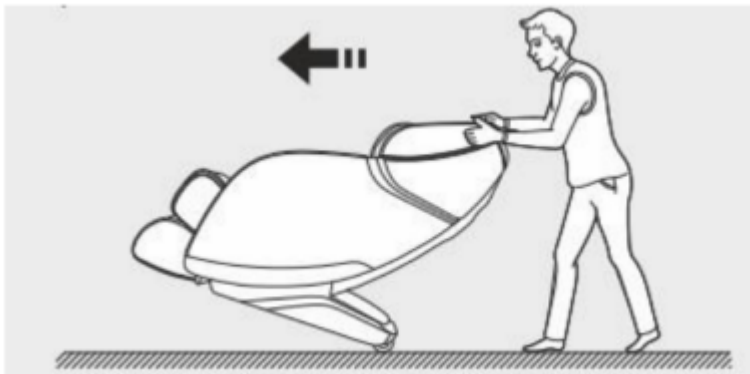


Megjegyzés: Egyenetlen felületeken vagy érzékeny padlóburkolatokon a masszázsfotel nem szabad tolni, hanem legalább két személy hordozza.

Padlóvédelem: Mivel a fotelnek nagyon nagy a súlya, javasoljuk, hogy az érzékeny padlókhöz padlóvédőt helyezzen el alá, pl. parketta, laminált stb. Ehhez használhat szőnyeget, de védőszőnyeget is.

A lábtámasz összeszerelése


1 lépés -1 kép: Csatlakoztassa a levegő tömlőt és a kábelleteget az opera láb és az alapteret közé. Helyezze vissza a hordágy kábeleit a keretbe.

2.lépés -2. kép: Helyezzen egy rögzítő elemet a lábtartó cső jobb és egy bal oldalára.

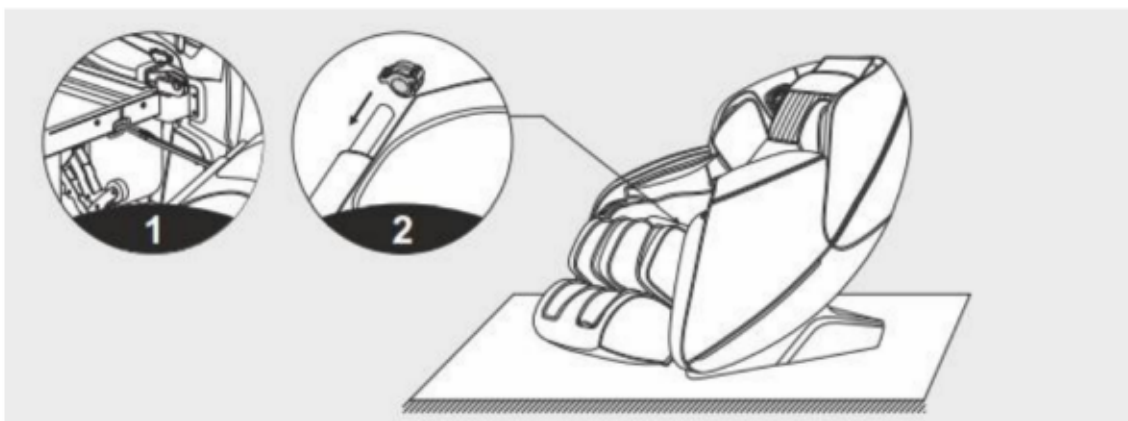

3.lépés-3.kép: Helyezze be a 2. lépésben rögzített rögzítőelemeket a masszázsfotel kampójába.


4.lépés- 4.kép: Mindkét rögzítőelemet mindig 2 db M4-es csavarral rögzítse. győződjön meg arról, hogy a levegőtömlő és a kábelleteget nincs becsípve vagy megsérülve.

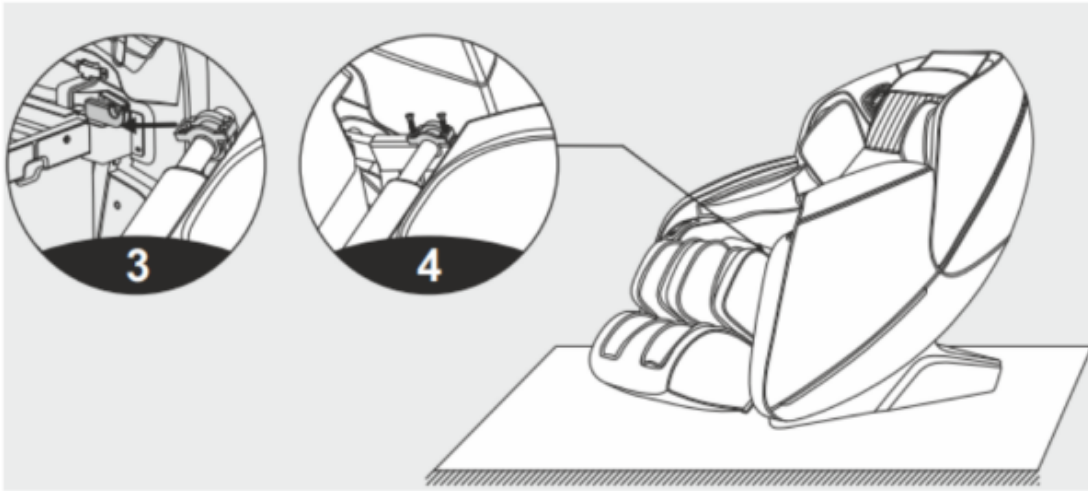

Helyszín és tárolás

Ezt a masszázsfotel kizárólag száraz, jól edzett beltéri használatra tervezték. Használata vagy tárolása nedves vagy vizes helyeken, például szaunákban, úszómedencékben, és kültéri helyeken, például erkélyeken, teraszokon, kertekben, garázsokban. Ezekben a helyeken az itt általában uralkodó magas páratartalom és egyéb hőmérsékletek miatt elektronikai hibák léphetnek fel. Az ilyen jellegű károokra semmilyen garancia nem vonatkozik.

A masszázsfotelhez válasszon egy száraz, vízszintes és jól temperált helyet az álláshoz vagy tároláshoz. A fotelt sem szabad tartósan közvetlen napfénynek kitenni, mert ellenkező esetben színe megváltozhat és megsérülhet. saját érdekében ügyeljen arra, hogy használat közben megfelelő szellőzés legyen az optimális oxigénellátás biztosítása érdekében. Mielőtt hosszabb használaton kívüli idő után ismét használná a masszázsfotel, győződjön meg arról, hogy minden rögzítőelem szilárdan rögzítve van és rögzítve van.

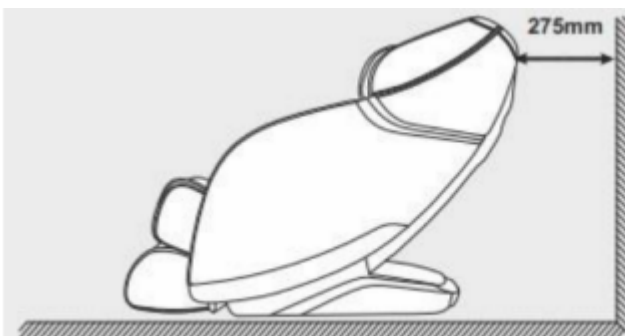

Az álló helyzetben lévő háttámla és a mögötte lévő bútorok vagy falak közötti távolságnak legalább 275 mm-nek kell lennie, ellenkező esetben a masszázsfotel, a falak vagy a bútorok megsérülhetnek a háttámla leengedésekor.

Termék részletek:

Modell: Masszázsszék MX 8.0z

Névleges feszültség: 220-240 V

Frekvencia: ~ 50/60Hz

Névleges teljesítményfelvétel: 115 W

Zajszint: ≤ 55 dB

Biztonsági szint: 1. osztály

Felhasználási terület: Lakásterület - csak magánhasználatra

Alkatrészlista

Alkatrész száma	Megnevezés	Mennyiség	Alkatrész száma	Megnevezés	Mennyiség
1	Lábtámasz	1	11	Dekoratív díszlécek	1/1
2	Elülső panel	1	12	Masszázsegység	1
3	Emelő henger	1	13	Huzatok, háttámla	1
4	Alap keret	1	14	Üléskeret	1
5	Oldalborító, elülső oldal	1/1	15	Háttámla	1
6	Oldalsó fedél	1/1	16	Tok, felső rész	1
7	Konzol oldalsó burkolat	1/1	17	Párna	1
8	Vezérlőegység	1	18	Üléshuzat	1
9	Hátlap	1	19	Karfa jobb	1
10	Karfa, bal	1	20	Huzat, üléskeret	1

